




Organ Recovery systems

LifePort® Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Kanül

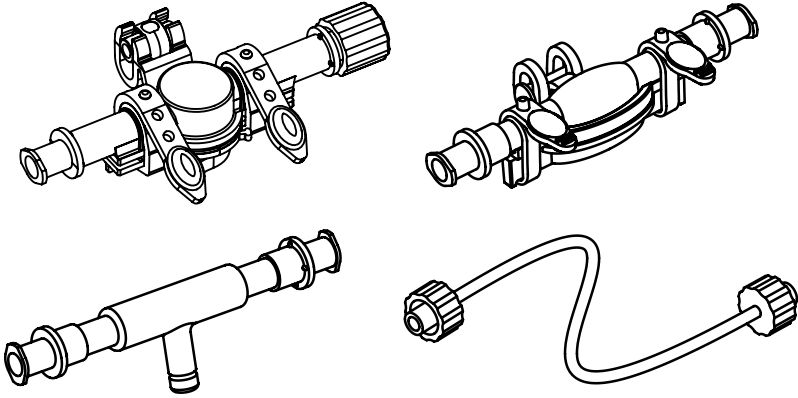

Kullanım Talimatları

Universal SealRing®, SealRing®, Straight ve Coupler
yalnızca LifePort Böbrek Taşıyıcı sistemiyle kullanım içindir.

 **Organ Recovery Systems, Inc.**
One Pierce Place, Suite 475W
Itasca, IL 60143
USA


T +1.847.824.2600
F +1.847.824.0234
Perfüzyon Yardım Hattı
+1.866.682.4800

Organ Recovery Systems NV
Culliganlaan 1B
1831 Diegem
Belgium

T +32.2.715.0000
F +32.2.715.0009
Perfüzyon Yardım Hattı
+32.2.715.0005
+33.9.6723.0016

ORS Representacoes do Brasil Ltda.
170 Moema Avenue, Suite 11 & 12
São Paulo, SP 04077-020
Brazil

T +55.11.98638.0086
F +55.11.98638.0089
Perfüzyon Yardım Hattı
+55.11.98638.0086

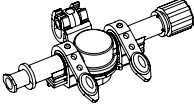

KULLANIM ENDİKASYONLARI

LifePort Böbrek Taşıyıcı (LKT) sistemi, koruma, taşıma ve nihai olarak bir alıcıya transplantasyon işlemini gerçekleştirmek için böbreklerin sürekli hipotermik makine perfüzyonunu sağlama amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

CİHAZ TANIMI

LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Universal SealRing Kanülü, perfüze edilecek damar aort yaması ile ya da aort yaması olmadan veya benzeri bir durumla sonlanmış olduğunda kullanılır.

LifePort Böbrek Taşıyıcı sisteminin tamamı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- LifePort Böbrek Taşıyıcı (LKT100P/IKT101P/IKT101PNG)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresi (LKT201/IKT201X)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Steril Örtü (LKT300)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Kanül (CAN/UCAN)

KULLANIM TALİMATLARI

LifePort Böbrek Taşıyıcı ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Perfüzyon Devresini Kullanım Talimatlarında açıklandığı gibi hazırlayın. Birden fazla damar kanüle ediliyorsa, LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Coupler Kullanım Talimatlarına bakın.



UYARI: Aşağıdaki prosedürü aseptik teknik kullanarak aseptik bir alanda gerçekleştirin.

1. LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Universal SealRing Kanülü steril alana koyun.
2. LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Universal SealRing Kanülü kayışları çözerek, gevşeterek ve sağ anvilı açarak açın.
3. Damarı anvillerin ortasına yerleştirin ve sonlandırılmış damar ucu anvilin üst yüzeyinin yaklaşık 1,5–2,0 mm üzerinde olacak şekilde konumlandırın.
4. Sağ anvil kapattın, damarı işitilebilir bir klik sesiyle yakalayın.

NOT: Gerekirse, dikiş veya başka bir uygun malzeme kullanılarak damara tutma destekleri eklenebilir. Yerleştirmeyi kolaylaştırmak için Sütür Bağlama Destekleri ve yuvaları tedarik edilmiştir.

5. Konik contayı dikkatlice damarın içine getirerek LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Universal SealRing Kanülün üst kısmını indirin.

NOT: Büyütülmüş kontrol camından bakıldığında, damar deliğinin ortalanmış, dairesel şekilli olup tıkalı olmadığından emin olun.

6. Her bir kayışı kanülün iki yarısının etrafına sarın ve kaidelerine sabitleyin.
7. Böbreği Böbrek Yatağına yerleştirin ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Universal SealRing Kanülü, Kanül Yuvasına oturtun.


NOT: Birden fazla damar perfüze ediliyorsa, Kanül Yuvasına yalnızca ana damar kanülü bağlanmalıdır.

8. Kanül Yuvasının yüksekliğini ve kanülün dönüşünü damarı rahat yerleştirecek şekilde ayarlayın.
9. Damarı görsel olarak inceleyin, bükülme veya tıkanıklık olmadığından emin olun.
10. Perfüze edilirken hafif şişmesine olanak sağlayacak şekilde Organ Tutma Ağını Böbrek Yatağındaki böbreğin üzerine sabitleyin.



KULLANIM TALİMATLARINA BAŞVURUN: Böbrek ve Böbrek Yatağının LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresine nasıl yerleştirileceğine ilişkin olarak LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresi Kullanım Talimatlarındaki prosedürü izleyin.

SealRing

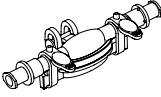

CAN0720
CAN1035

KULLANIM ENDİKASYONLARI

LifePort Böbrek Taşıyıcı (LKT) sistemi, koruma, taşıma ve nihai olarak bir alıcıya transplantasyon işlemini gerçekleştirmek için böbreklerin sürekli hipotermik makine perfüzyonunu sağlama amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

CİHAZ TANIMI

LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık SealRing Kanülü, eksplante edilen böbreklerde perfüze edilecek damar aort yaması veya benzeri bir durumla sonlandığında kullanılır.

LifePort Böbrek Taşıyıcı sisteminin tamamı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- LifePort Böbrek Taşıyıcı (LKT100P/IKT101P/IKT101PNG)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresi (LKT201/IKT201X)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Steril Örtü (LKT300)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Kanül (CAN/UCAN)

KULLANIM TALİMATLARI

LifePort Böbrek Taşıyıcı ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Perfüzyon Devresini Kullanım Talimatlarında açıklandığı gibi hazırlayın. Birden çok atardamar içeren yamaların bir LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık SealRing Kanüle yerleştirilmesi mümkün olabilir. Aksi takdirde, birden fazla damara kanülasyon yapmak için LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Coupler Kullanım Talimatlarına bakın.



UYARI: Belirtildiği yerde, aşağıdaki prosedürü aseptik teknik kullanarak aseptik bir alanda gerçekleştirin.

1. LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık SealRing Kanülü steril alana koyun.
2. Kayışları çözün ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık SealRing Kanülü açın.
3. Aort yamasını kanül halkasının ortasından kaydırın.
4. Dokunun tüm kanül halkasını kapladığından emin olarak yamayı düz bir şekilde yatırın. Gerekirse, LifePort Kidney Transporter Tek Kullanımlık SealRing Kanül sabitlemeye kadar dokuyu geçici olarak yerinde tutmak için yardımcı aletler kullanılabilir.
5. Dokuyu kanülün iki yarısı arasında sabitleyerek LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık SealRing Kanülü kapatın.
6. Her bir kayışı kanülün iki yarısının etrafına sarın ve kaidelerine sabitleyin.
7. Böbreği Böbrek Yatağına yerleştirin ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık SealRing Kanülü, Kanül Yuvasına oturtun.


NOT: Birden fazla damar perfüze ediliyorsa, Kanül Yuvasına yalnızca ana damar kanülü bağlanmalıdır.

8. Kanül Yuvasının yüksekliğini ve kanülün dönüşünü damarı rahat yerleştirecek şekilde ayarlayın.
9. Damarı görsel olarak inceleyin, bükülme veya tıkanıklık olmadığından emin olun.
10. Perfüze edilirken hafif şişmesine olanak sağlayacak şekilde Organ Tutma Ağını Böbrek Yatağındaki böbreğin üzerine sabitleyin.



KULLANIM TALİMATLARINA BAŞVURUN: Böbrek ve Böbrek Yatağının LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresine nasıl yerleştirileceğine ilişkin olarak LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresi Kullanım Talimatlarındaki prosedürü izleyin.

Straight

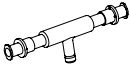

CAN0003
CAN0005
CAN0008

KULLANIM ENDİKASYONLARI

LifePort Böbrek Taşıyıcı (LKT) sistemi, koruma, taşıma ve nihai olarak bir alıcıya transplantasyon işlemini gerçekleştirmek için böbreklerin sürekli hipotermik makine perfüzyonunu sağlama amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

CİHAZ TANIMI

LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Straight Kanül, perfüze edilecek damar yama olmadan sonlanmış olduğunda veya zarda potansiyel intimal astar hasarı endişesi söz konusu olmadığında kullanılır.

LifePort Böbrek Taşıyıcı sisteminin tamamı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- LifePort Böbrek Taşıyıcı (LKT100P/IKT101P/IKT101PNG)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresi (LKT201/IKT201X)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Steril Örtü (LKT300)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Kanül (CAN/UCAN)

KULLANIM TALİMATLARI

LifePort Böbrek Taşıyıcı ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Perfüzyon Devresini Kullanım Talimatlarında açıklandığı gibi hazırlayın. Birden fazla damar kanüle ediliyorsa, LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Coupler Kullanım Talimatlarına bakın.



UYARI: Aşağıdaki prosedürü aseptik teknik kullanarak aseptik bir alanda gerçekleştirin.

1. LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Straight Kanülü steril alana koyun.
2. LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Straight Kanül ucunu damar içine, gereğinden fazla olmayacak şekilde, yerleştirin. Damara yerleştirilen kanül ucunun uzunluğunun en aza indirilmesi, gerekirse damarın o bölümünün çıkarılmasına imkan sağlayacaktır.
3. Damarı ipek ipler, damar halkaları veya başka uygun malzemeler kullanarak yerine sabitleyin. Yerleştirme ve sabitleme için uç kısımda bir oluk vardır.
4. Böbreği Böbrek Yatağına yerleştirin ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Straight Kanülü Kanül Yuvasına oturtun.
5. Kanül Yuvasının yüksekliğini ve kanülün dönüşünü damarı rahat bir şekilde konumlandırarak şekilde ayarlayın.
6. Damarı görsel olarak inceleyin, bükülme veya tıkanıklık olmadığından emin olun.
7. Perfüze edilirken hafif şişmesine olanak sağlayacak şekilde Organ Tutma Ağını Böbrek Yatağındaki böbreğin üzerine sabitleyin.



KULLANIM TALİMATLARINA BAŞVURUN: Böbrek ve Böbrek Yatağının LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresine nasıl yerleştirileceğine ilişkin olarak LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresi Kullanım Talimatlarındaki prosedürü izleyin.

Coupler



CAN1000

KULLANIM ENDİKASYONLARI

LifePort Böbrek Taşıyıcı (LKT) sistemi, koruma, taşıma ve nihai olarak bir alıcıya transplantasyon işlemini gerçekleştirmek için böbreklerin sürekli hipotermik makine perfüzyonunu sağlama amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

CİHAZ TANIMI

LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Coupler, birden fazla damarın perfüze edilmesi gerektiğinde iki veya daha fazla kanülü bağlamak için kullanılır.

LifePort Böbrek Taşıyıcı sisteminin tamamı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- LifePort Böbrek Taşıyıcı (LKT100P/IKT101P/IKT101PNG)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresi (LKT201/IKT201X)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Steril Örtü (LKT300)
- LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Kanül (CAN/UCAN)

KULLANIM TALİMATLARI

LifePort Böbrek Taşıyıcı ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Perfüzyon Devresini Kullanım Talimatlarında açıklandığı gibi hazırlayın.



UYARI: Aşağıdaki prosedürü aseptik teknik kullanarak aseptik bir alanda gerçekleştirin.

1. LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Coupler Kanülü steril alana koyun.
2. LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık SealRing Kanülü, Straight Kanülü veya Universal SealRing Kanülü perfüze edilecek damarların her birine Kullanım Talimatlarına göre bağlayın.
3. Bir ana damar tespit edin.
4. Böbreği Böbrek Yatağına yerleştirin ve ana damara bağlı kanülü Kanül Yuvasına oturtun.
5. Kanül Yuvasının yüksekliğini ve kanülün dönüşünü damarı rahat bir şekilde konumlandırarak şekilde ayarlayın.
6. Coupler Kanülün bir ucunu Uç Kapağının yerine takın.
7. Coupler Kanülün ikinci ucunu diğer kanülün bağlantı noktasına takın.
8. Ek bir Coupler Kanül kullanın ve kullanılan her bir LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Kanül için 6. ve 7. adımları tekrarlayın.
9. Damarı görsel olarak inceleyin, bükülme veya tıkanıklık olmadığından emin olun.
10. Perfüze edilirken hafif şişmesine olanak sağlayacak şekilde Organ Tutma Ağını Böbrek Yatağındaki böbreğin üzerine sabitleyin.



KULLANIM TALİMATLARINA BAŞVURUN: Böbrek ve Böbrek Yatağının LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresine nasıl yerleştirileceğine ilişkin olarak LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Perfüzyon Devresi Kullanım Talimatlarındaki prosedürü izleyin.

SAKLAMA KOŞULLARI

2°C ila 40°C arasında saklayın. Aşırı ısı ve nemden kaçının. Kuru yerde saklayın ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Paket hasarlı veya açık olmadığı sürece sterildir.

KONTRENDİKASYONLAR

Belirtildiği şekilde kullanıldığında bilinen bir kontrendikasyon yoktur.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

R_{Only} DİKKAT: Federal (ABD) yasalar, bu cihazın satışını bir hekim tarafından veya onun emriyle olacak şekilde kısıtlar.

! DİKKAT: LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Ürünleri, doğrudan güneş ışığı almayan, kapalı ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

! UYARI: LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Ürünlerini görsel olarak kontrol edin. Parçalar gevşekse, çatlamışsa, kırılmışsa veya sıvı sızıntısı varsa kullanmayın.

! UYARI: Sadece tek kullanımlıktır. Yeniden kullanmayın, yeniden işleme tabi tutmayın ve yeniden sterilize etmeyin. Tek kullanımlık cihazların yeniden kullanılması, yeniden işlenmesi veya yeniden sterilize edilmesi, kontaminasyon nedeniyle hasta veya kullanıcılar için potansiyel enfeksiyon riski oluşturur. Bu kontaminasyon yaralanmaya, hastalığa veya başka ciddi hasta komplikasyonlarına yol açabilir.

! UYARI: Böbreği tutarken ve LifePort Böbrek Taşıyıcı Tek Kullanımlık Ürünlerini ve perfüzyonu kullanırken ve bertaraf ederken, patojenlerin tıbbi personele ve hastalara olası bulaşını önlemek için standart aseptik teknik ve evrensel önlemleri (ör. eldiven, maske, önlük, gözlük veya buna eşdeğer göz koruması, biyolojik tehlike torbaları) kullanın. Tek başına çalışan uygulayıcı, bu koşulları sağlamaya özellikle dikkat göstermelidir.

TEKNİK YARDIM

Organ Recovery Systems 7/24 Perfüzyon Yardım Hattı'na şu numaralardan ulaşabilirsiniz: +866.682.4800 (ABD'de ücretsiz), +32.2.715.0005 (Belçika), +55.11.98638.0086 (Brezilya), or +33.9.6723.0016 (Fransa).

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

	Uyarı/Dikkat		Son Kullanma Tarihi, YYYY-AA-GG		Sıcaklık Limitleri
	Lot Numarası		Üretim Tarihi, YYYY-AA-GG		Kullanım Talimatına Başvurun
	Referans Numarası		Üretici		Güneş Işığından Uzak Tutun
	Yeniden Kullanmayın		Yeniden Sterilize Etmeyin		Kuru Yerde Saklayın
	Etilen Oksit Kullanılan Steril Tıbbi Cihazlar		Tıbbi Cihaz		Reçeteli Tıbbi Cihaz
	Menşee Ülke		İthalatçı		Tekli Steril Bariyer Sistemi

**AVUSTRALYA
SPONSORU**

Aurora BioScience Pty Ltd
Unit 4, 22 Lexington Drive
Bella Vista, NSW 2153
Australia



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

**BK SORUMLU
KİŞİ**

MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street, First Floor
London, W1W 7LT
United Kingdom